

UPS Stool Collection Instructions

Preparation




1. Before collecting your sample, put on the gloves included in the kit. Write your name and date of birth on both tube labels and the biohazard specimen bag. Write your date of birth below your name on the tube with the liquid.

2. Open the paper collection bowl and follow the instructions to install it on your toilet. Have a bowel movement into the bowl.

Sample Collection



3. Grab the tube **without** liquid and use the scoop attached to the lid to put stool into the tube, filling it between halfway and the fill line. Next, remove the tube **with** liquid from the small plastic bag, discard the bag, and use the scoop attached to this lid to add stool into this tube until the stool or the liquid reaches the fill line. **Do not overfill the tubes. Screw the caps on both tubes tightly.**

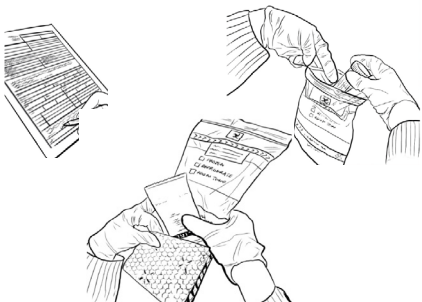

4. Write the date and time of collection on **BOTH** tubes, the biohazard bag, and the Diarrhea Pathogen Requisition or test order/paperwork received from your provider. Place **BOTH** tubes (not the paperwork) in the biohazard bag and seal it. If the ice pack is not ready, refrigerate the samples. **DO NOT place samples in the freezer.**

5. Place **BOTH** the ice pack and the biohazard bag in the silver pack. Seal the silver pack.

Send Sample via UPS



6. Place the sealed silver pack and the paperwork in the pre-paid return shipping pack. Seal the shipping pack. Document the tracking number located on the label of the pre-paid shipping pack by either taking a picture of the label or writing the tracking number on the UPS Patient Quick Reference Guide.



7. Drop off the shipping pack at a UPS store or drop box, or schedule a pickup via UPS. You can visit www.ups.com or call 1-800-742-5877 to find a store or drop box location or schedule a pickup. If you schedule a pickup, please reference the following information:

Account Number: 7A280X Account Number Zip Code: 07755

Other

Adhesive-remover pad


8. If needed, use the adhesive remover pad to remove adhesive from the toilet bowl.

Please do not send anything other than what has been provided to you in this kit.

If you have any questions, please feel free to contact Genesis Laboratory via phone at 732-389-1530, option 0, or email at genesisresults@genesislaboratory.com

Instrucciones para la recolección de heces de UPS

Preparación

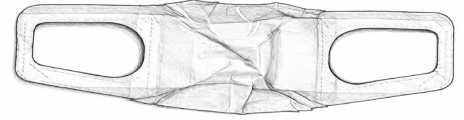

1. Antes de recolectar su muestra, póngase los guantes incluidos en el kit. Escriba su nombre y fecha de nacimiento en las etiquetas de ambos tubos y en la bolsa para muestras de riesgo biológico. Escriba su fecha de nacimiento debajo de su nombre en el tubo que contiene el líquido.

2. Abra el recipiente de papel para recolectar la muestra y siga las instrucciones para colocarlo en el inodoro. Haga una deposición en el recipiente.

Recolección de Muestras



3. Tome el tubo que no contiene líquido y use la cuchara que está unida a la tapa para colocar materia fecal en el tubo, llenándolo hasta un nivel entre la mitad y la línea de llenado. Luego, saque el tubo que contiene líquido de la bolsa de plástico pequeña y deseche la bolsa. Use la cuchara que está unida a esta tapa para agregar materia fecal al tubo hasta que la materia fecal o el líquido llegue a la línea de llenado. No llene demasiado los tubos. Cierre bien las tapas de ambos tubos, enroscándolas firmemente.



4. Escriba la fecha y la hora de recolección en AMBOS tubos, en la bolsa para muestras de riesgo biológico y en la Solicitud de Análisis de Patógenos de Diarrea o en la orden de análisis/documentación recibida de su proveedor. Coloque AMBOS tubos (no la documentación) dentro de la bolsa para muestras de riesgo biológico y ciérrela. Si la bolsa de hielo aún no está lista, refrigere las muestras. NO coloque las muestras en el congelador.

5. Coloque TANTO la bolsa de hielo como la bolsa para muestras de riesgo biológico dentro del paquete plateado. Selle el paquete plateado.

Envíe la muestra por UPS



6. Coloque el paquete plateado sellado y la documentación en el paquete de envío de devolución prepagado. Selle el paquete de envío. Registre el número de rastreo que aparece en la etiqueta del paquete de envío prepagado, ya sea tomando una fotografía de la etiqueta o escribiendo el número de rastreo en la Guía de Referencia Rápida para Pacientes de UPS.



7. Entregue el paquete de envío en una tienda de UPS o en un buzón de UPS, o programe una recolección a través de UPS. Puede visitar www.ups.com o llamar al 1-800-742-5877 para encontrar una tienda o un buzón de UPS, o para programar una recolección. Si programa una recolección, proporcione la siguiente información:

Número de cuenta: 7A280X Código postal del número de cuenta: 07755

Otro

Adhesive
remover
pad

8. Si es necesario, use la toallita removedora de adhesivo para eliminar los residuos de adhesivo del inodoro.

No envíe nada que no haya sido proporcionado en este kit.

Si tiene alguna pregunta, no dude en comunicarse con Genesis Laboratory por teléfono al 732-389-1530, opción 0, o por correo electrónico a genesislresults@genesislaboratory.com.